

機械器具 4 9 医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器
管理医療機器 単回使用穿孔器（JMDN コード：12989002）

瞬間ピアッサー


再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 耳たぶへのピアッシング以外の目的で使用しないこと
- 金属アレルギーの既往歴がある者は使用しないこと

【形状・構造及び原理等】

＜構成＞

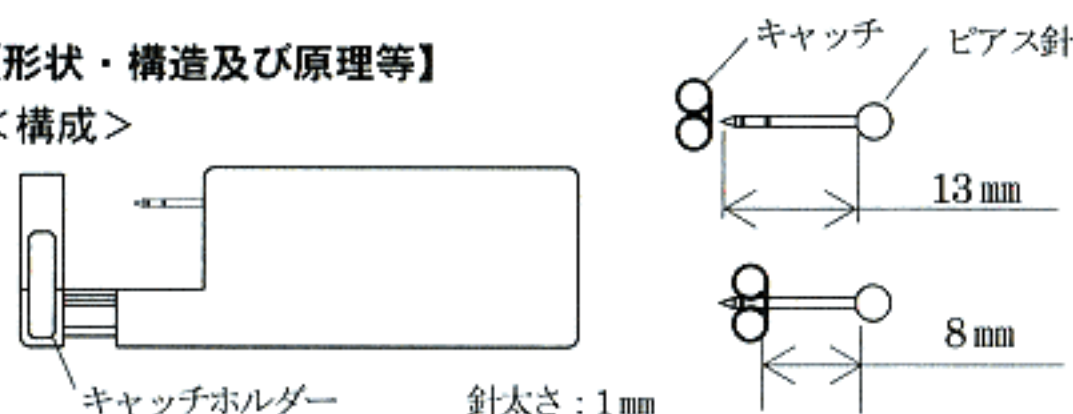

＜原材料＞

ピアス針、キャッチの原材料は次のいずれか
※ステンレス鋼、ステンレス鋼と金（金メッキ）、チタン

＜原理＞

本体内部の打ち込みシャフトにスプリングを圧縮して配置し、キャッチホルダーを押し込むことで、スプリングの留め置く板バネをずらすことにより、針ホルダーが瞬時的に飛び出て、容易に耳たぶにピアスホールを開けることができる。

【使用目的又は効果】

＜使用目的＞

ピアスを装着するために、耳たぶにピアスホールを開けるのに用いる穿孔器である。

【使用方法等】

1. 清潔な手で耳たぶを消毒し、挟むようにピアッサーを持ちます。
2. ピアス針の先端をピアッシングしたい箇所に合わせます。一回限りの使い捨て製品であるので、試し打ちはできません。
3. 位置を再度確認して、ピアッサーを強く握ると、「カシャ」という音とともにピアス（ピアス針とキャッチ）がセットされます。
4. 手をゆるめ、ピアッサーをまっすぐ下に下ろし、ピアッシングは完了です。
5. キャッチがきつめに設定されていますので、セット後に耳たぶに圧迫を感じた場合は、ゆるめてください。

【使用上の注意】

1. 使用前の注意

- 本品は、医療機器であるため、必ず医師の指導に基づいてご使用ください。また医師の資格の無い方が、他の人にピアッシングを行うことは法律で禁じられています。
- 金属アレルギーの方、耳たぶに肌荒れを起こしている方、耳たぶの厚さが 8 mm 以上の方、妊娠中や病気療養中の方、出血しやすく血液の止まりが悪い方、また健康が優れないと思われる方は、ご使用にしないでください。
- ピアッシング当日は、入浴、洗髪、パーマ等は控えてください。
- ピアッサーは滅菌されていますので、包装の破損等の異常が認められた場合は使用しない。また、使用期限を確認し、滅菌パックを開封後は直ちに ご使用ください。(開封後長く放置すると汚染される恐れがある)
- ピアッシングを行う前に、必ず手や耳たぶを清潔にしてください。
- ピアッシングの際、周囲に人がいないことを確認して、安全な場所で行ってください。(針ホルダーが不用意に飛び散ることがある)

2. 使用後の注意

- 使用後穿孔部に多量の出血或いは内出血や異常な痛みがある場合は、直ちに使用を中止して医師の診断を受けてください。
- ピアスホールが完成するまでは、サウナなどの高温・多湿の環境及びスキー場などの寒い場所に行くのを控えてください。(金属は熱伝導率が高く、火傷やしもやけの原因になります)
- ピアスホールが完成するまでの間、入浴、洗髪の後には、必ず消毒してください。
- 消毒液は、個々の体質による異常の無い事を確認の上ご使用ください。
- ピアッシング後は、医師の指導に従って耳たぶ表裏の針の周辺に、ピアスホールが完成するまでの 30 日間に、1 日 2 回消毒液を付けた綿棒で消毒してください。消毒の際、ピアスを外さず清潔な手で時折回してください。
- 通常ピアッシング後 30 日でピアスホールが完成します。完成後は本品を取り外し、お好みのピアスを消毒してご使用ください。(本品は耳た

ぶに穴を開けることを想定した製品なので、ピアスホールの完成後は使用しないこと)

- 30日を超えてもピアスホールが完成しない場合は、医師の指導の下、適切な処置を受けてください。
- ピアッシング後、約 3 ヶ月間は 24 時間以上ピアスを耳から外したままにしないでください。(外したままにしたり細いピアスに換えるとピアスホールが小さくなったり、ふさがり可能性がある)
- ピアスホール完成後もホール周辺は常に清潔に保つよう気をつけてください。

3. その他の注意

- 幼児、子供等の手に触れないように注意してください。
- 使用後は速やかに適切な場所に捨ててください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。
2. 使用期間：製造後 3 年（自己認証による）

※製造番号・使用期限は包装の側面に表示

例（上）製造番号：160101

（下）使用期限：201812…2018 年 12 月

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

栃木精工株式会社

〒328-0012 栃木県栃木市平柳町 2-1-5

TEL：0282-27-1133

瞬間ピアッサーに関するご質問、お問い合わせは
下記のフリーダイヤルで！

瞬間ピアッサーご相談窓口

 **0120-160-856**

受付時間 AM9:30 ~ PM5:00 (月曜日～金曜日)