

機械器具 4 9 医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器
管理医療機器 単回使用穿孔器 (JMDN コード：12989002)

瞬間ピアッサー


再使用禁止

【禁忌・禁止】


- 再使用禁止
- * ● 耳たぶ及び耳軟骨へのピアッシング以外の目的で使用しないこと
[破損の原因となるため]
- * ● 金属アレルギーの既往歴がある者は使用しないこと [アレルギー
反応が起こる可能性があるため]

【形状・構造及び原理等】

<構成>

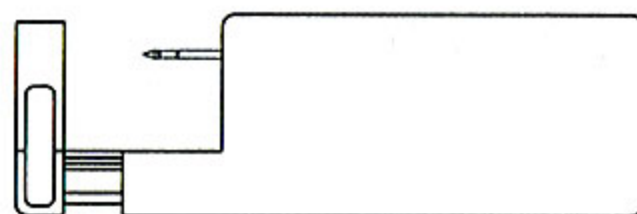

キャッチホルダー

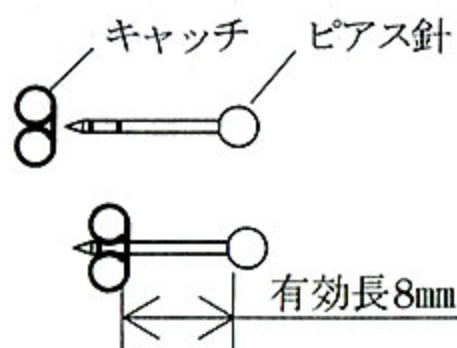

有効長8mm

<タイプ>	<ピアス針太さ>	<有効長>
耳たぶ	1.0 mm	8 mm
* 耳軟骨	1.6 mm	

* <原材料>

ピアス針、キャッチの原材料は次のいずれか

※ステンレス鋼、ステンレス鋼と純金メッキ、純チタン

* <原理>

本体内部の打ち込みシャフトにスプリングを圧縮して配置し、キャッチホルダーを押し込むことで、スプリングの留め置く板バネをずらすことにより、針ホルダーが飛び出て、容易に耳たぶ及び耳軟骨にピアスホールを開けることができる。

* 【使用目的又は効果】

ピアスを装着するために、耳たぶ及び耳軟骨にピアスホールを開けるのに用いる穿孔器である。

【使用方法等】

- * 1. 清潔な手で耳たぶ及び耳軟骨を消毒し、挟むようにピアッサーを持ちます。
- 2. ピアス針の先端をピアッシングしたい箇所に合わせます。一回限りの使い捨て製品であるので、試し打ちはできません。
- * 3. 位置を再度確認して、ピアッサーを強く握ると、「カシャ」という音とともにピアス（ピアス針とキャッチ）が穿孔部にセットされます。
- 4. 手をゆるめ、ピアッサーをまっすぐ下に下ろし、ピアッシングは完了です。
- * 5. キャッチがきつめに設定されていますので、セット後に耳たぶ及び耳軟骨に圧迫を感じた場合は、ゆるめてください。

<使用方法に関連する使用上の注意>

- ピアッサーは滅菌されていますので、包装の破損等の異常が認められた場合は使用しない。また、使用期限を確認し、滅菌パックを開封後は直ちにご使用ください。[開封後長く放置すると汚染される恐れがある]
- * ● 開封後は、ピアス針に手を触れずに使用すること。
- * ● ピアッシングを行う前に、必ず手や穿孔部を清潔にしてください。
- ピアッシングの際、周囲に人がいないことを確認して、安全な場所で行ってください。[針ホルダーが不用意に飛び散ることがある]

【使用上の注意】

＜重篤な基本的注意＞

- 本品は医療機器であるため、必ず医師の指導に基づいてご使用ください。また医師の資格の無い方が、ピアッシングを行うことは法律で禁じられています。
- * ●金属アレルギーの方、耳たぶ及び耳軟骨に肌荒れを起こしている方、耳たぶ及び耳軟骨の厚さが8mm以上の方、妊娠中や病気療養中の方、出血しやすく血液の止まりが悪い方、また健康が優れないと思われる方は、ご使用にならないでください。
- ピアッシング当日は、入浴、洗髪、パーマ等は控えてください。
- * ●使用後穿孔部に多量の出血或いは内出血や異常な痛みがある場合は、直ちに使用を中止して適切な治療を実施してください。
- * ●サウナなどの高温・多湿の環境及びスキー場などの寒い場所に行くのを控えてください。[本品のピアス針は熱伝導率が高く、火傷やしもやけの原因になります]
- * ●ピアッシング後は、ピアスホールが完成するまでの間、医師の指導に従ってください。
- * ●本品は、耳たぶ及び耳軟骨に穴を開けることを想定した製品です。
本品を、ピアスホール完成後は使用しないでください。
- 幼児、子供等の手に触れないように注意してください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。
- * 2. 使用期間：製造後5年（自己認証による）
※製造番号・使用期限は包装の側面に表示
例（上）製造番号：210101
（下）使用期限：202512…2025年12月

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

栃木精工株式会社

〒328-0012 栃木県栃木市平柳町 2丁目1番5号

TEL：0282-27-1133

瞬間ピアッサーに関するご質問、お問い合わせは
下記のフリーダイヤルで！

瞬間ピアッサーご相談窓口

 **0120-160-856**

受付時間 AM9:30～PM5:00
(月曜日～金曜日)